

KOBA VISION

SenseView POCKET P350



Manuel d'Utilisation

1. SenseView Pocket P350 – Contenu de l'emballage


Nous vous remercions d'avoir choisi le SenseView Pocket P350. Prenez le temps de découvrir le contenu de son emballage.

- SenseView Pocket P350
- Adaptateur AC
- Trousse
- Cordon
- Manuel d'utilisation

2. Utilisation et entretien de la batterie

- La batterie doit être complètement chargée avant sa première utilisation. Mettez la batterie en charge et attendez 3 heures avant de l'utiliser. Branchez l'adaptateur au DC-JACK afin de procéder au chargement de la batterie.
- Otez la feuille de protection de l'écran lors de la première utilisation du SenseView Pocket P350.
- Afin d'éviter d'éventuels dégâts électriques, n'utilisez que l'adaptateur AC qui accompagne votre produit.
- N'exposez pas l'appareil à de l'eau ou à de la poussière afin d'éviter un embrasement du à un choc électrique.
- Il est probable que la durée de vie de la batterie se réduise après 6 mois d'utilisation.

3. Boutons et fonctionnement

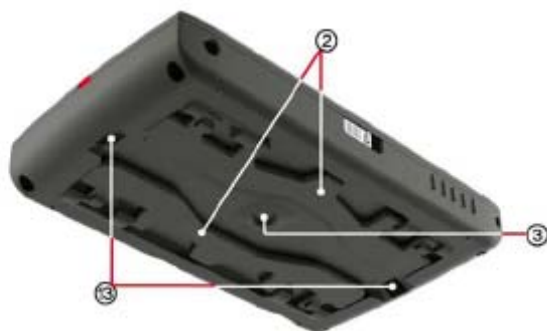

1. Mise en marche et arrêt

Le SenseView Pocket P350 est mis en marche en poussant l'interrupteur vers la droite. En poussant à nouveau l'interrupteur vers la droite l'appareil est mis hors service.

2. Pieds

Pour la lecture de texte ou d'imprimés, les pieds situés sous le SenseView P350 doivent être mis en place comme indiqué sur l'image 1.



Image1

3. Caméra

La caméra se trouve au milieu de la face arrière du SenseView Pocket P350.

4. Agrandissement et réduction

Le bouton permettant le réglage de l'agrandissement se trouve dans l'angle supérieur gauche de l'appareil. Une pression sur le bouton modifie l'agrandissement.

Niveau d'agrandissement	Distance de l'objet	
	2 cm	4,5 cm
Niveau 1	3,5x	1,5x
Niveau 2	5,25x	2,25x
Niveau 3	7x	3x
Niveau 4	10,5x	4,5x

Si après avoir atteint le niveau 4, vous effectuez encore une pression sur le bouton, l'appareil revient alors au niveau d'agrandissement 1. Lorsque vous éteignez l'appareil, celui-ci mémorise le dernier niveau d'agrandissement utilisé.

5. Luminosité

La luminosité de l'écran peut être réglée sur 4 niveaux.

Chaque pression sur le bouton du milieu situé sur le côté gauche de l'appareil, induit un changement de niveau de la luminosité. Si après avoir atteint le niveau 4, vous exercez encore une pression sur le bouton, l'appareil revient alors au niveau 1. Lorsque vous éteignez l'appareil, celui-ci mémorise le dernier niveau de luminosité utilisé.

6. Modes de lecture

Pour modifier les modes de lecture ou les couleurs de l'arrière-plan et des caractères, vous devez appuyer sur le bouton inférieur situé sur le côté gauche de l'appareil. 5 modes de lecture sont disponibles:

- Mode Couleurs (1)
- Noir sur fond blanc (2)
- Noir sur fond blanc (contraste élevé) (3)
- Blanc sur fond noir (4)
- Blanc sur fond noir (contraste élevé) (5)

Utilisation:

- Utilisez le mode 1 pour visualiser des objets en couleurs.
- Utilisez les modes 2 et 4 pour lire, écrire ou déchiffrer des petits caractères ou du texte imprimé légèrement.
- Utilisez les modes 3 et 5 pour une lecture avec un contraste élevé.

Si vous appuyez sur le bouton lorsque vous êtes au mode 5, l'appareil revient au mode 1. Si vous éteignez l'appareil, il mémorise le dernier paramètre utilisé.

7. Eclairage

l'éclairage peut être paramétré à l'aide du bouton situé en haut du côté droit de l'appareil. Ce bouton offre 3 niveaux d'éclairage:

- a. Inactif
- b. Moyen
- c. Maximal

Si vous appuyez sur le bouton alors que vous êtes en position 3, l'appareil revient à la position 1. Lorsque vous éteignez l'appareil alors que l'éclairage est désactivé, celui-ci affichera la luminosité maximale la prochaine fois que vous allumerez votre appareil.

8. Figurer l'image

L'image peut être figée en appuyant sur le bouton situé en haut de l'appareil. La couleur, l'agrandissement et la luminosité peuvent en être paramétrés.

9. Indicateur de batterie

Une petite lumière rouge s'allume lorsque l'appareil charge la batterie. Lorsque celle-ci est complètement chargée, la couleur de la lampe devient verte. Si la lampe clignote cela signifie que l'appareil se trouve en mode d'économie d'énergie.

10. Ecran

Attention: l'écran peut devenir très chaud lorsque vous utilisez longtemps l'appareil ou lorsque sa batterie est mise en charge.

11. DC-JACK

Pour recharger la batterie, vous devez raccorder l'adaptateur livré au DC-JACK. Afin d'éviter les chocs électriques, n'utilisez que l'adaptateur qui vous a été fourni avec l'appareil.

Attention: Evitez d'utiliser votre force pour brancher l'adaptateur ou le débrancher de l'appareil. Vous risquez d'abimer le DC-JACK du SenseView Pocket P350.

12. Cordon

Le cordon peut être fixé à l'appareil.

13. Lampes LED

4. Fonctions

1. Lecture

Installez les pieds du SenseView Pocket P350 pour visualiser des imprimés ou lire du texte comme montré sur l'image 2. Vous pouvez également n'utiliser qu'un pied comme indiqué sur l'image 3.



Image 2



Image 3

Attention: N'appuyez pas sur le SenseView Pocket P350 pendant votre lecture. Les pieds sont équipés de 4 billes métalliques qui facilitent le déplacement de l'appareil. Si vous exercez une pression, ces billes pourraient abîmer le papier.

2. Distance

Vous pouvez utiliser le SenseView Pocket P350 pour visualiser un objet à une distance de 2 à 4,5 cm comme montré sur l'image 4.



Image 4

3. Mode économie d'énergie

- a. Lorsque l'appareil est inutilisé pendant 2 minutes, il bascule automatiquement en mode d'économie. L'écran s'éteint et l'indicateur de batterie clignote. Si dans les 3

minutes suivantes l'appareil reste inutilisé, il s'éteint alors complètement.

Attention: Lorsque vous figez l'image à l'aide du bouton du dessus, le mode économie d'énergie ne fonctionne pas. L'appareil va s'éteindre automatiquement si après 3 minutes vous n'avez poussé sur aucun autre bouton.

- b. Vous pouvez annuler le mode d'économie en déplaçant l'appareil ou en appuyant sur l'un ou l'autre bouton. Si l'appareil s'éteint après 3 minutes, vous devez le remettre en service à l'aide du bouton on/of (bouton 1)

4. Etat de la batterie

- a. Vous pouvez contrôler l'état de la batterie en appuyant simultanément sur le bouton de l'agrandissement (bouton 4) et sur celui de l'éclairage (bouton 7).
- b. L'état de charge de la batterie s'affiche en bleu à l'écran lorsque l'adaptateur AC n'est pas raccordé.



- c. Branchez l'adaptateur AC afin de charger la batterie lorsque l'indicateur de charge opère un clignotement de couleur bleue.



- d. L'indicateur de la batterie s'affiche en rouge lorsque l'appareil est mis en charge avec l'adaptateur AC. Lorsque la batterie est complètement chargée, l'indicateur de charge s'affiche en vert.



5. Activer/Désactiver le signal

En appuyant simultanément sur le bouton du contraste (bouton 6) et sur le bouton de l'éclairage (bouton 7), vous pouvez activer ou désactiver le signal sonore associé à une pression sur un bouton.

5. Spécifications

- Ecran: 3,4 pouces (format d'image 16:10)
- Agrandissement: 1,5x – 10,5x
- Distance de vue: 2 cm – 4,5 cm
- Luminosité de l'écran: 4 niveaux
- Modes de lecture: 5
 - Mode couleurs (1)
 - Noir sur fond blanc (2)
 - Noir sur fond Blanc (contraste élevé) (3)
 - Blanc sur fond noir (4)
 - Blanc sur fond noir (contraste élevé) (5)
- Eclairage: 3 niveaux
- Batterie: Lithium Polymère rechargeable
 - Usage continu: 3,5 heures
 - Durée de charge: 3 heures
- Dimensions: 11,5 x 6,7 x 1,8 cm (l x p x H)
- Poids: 151 grammes

6. Garantie – 2 ans

- La garantie est applicable pendant 2 ans à partir de la date d'achat. La batterie est exclue de cette garantie de 2 ans.
- La période de garantie de la batterie s'étend sur une période de 6 mois à partir de la date d'achat.

KOBA Vision

De Oude Hoeven 6
3971 Leopoldsburg

Tel. +32 11 51 70 80
Fax +32 11 51 70 81

info@kobavision.be
<http://www.kobavision.be>